


Comment se servir du dispositif de prélèvement Evalyn Brush

Trousse d'autodépistage du VPH




1 Lavez vos mains et prenez l'écouvillon.

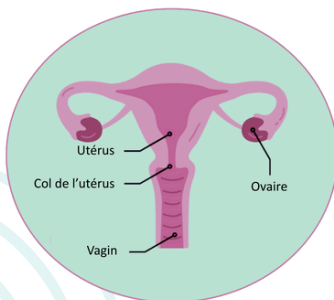


- Balayez le code QR ci-dessus à l'aide de la caméra de votre téléphone intelligent ou consultez le www.roversmedicaldevices.com/animation-use-evalyn-brush (en anglais).
- Lavez vos mains avant de manipuler le dispositif.
- Sortez la trousse de son emballage.
- Conservez l'emballage. Vous en aurez besoin après avoir fait votre prélèvement.

2 Préparez l'écouvillon.

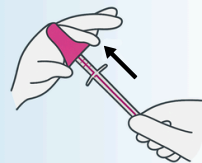



- Une étiquette d'identification avec vos renseignements personnels a été apposée sur l'écouvillon.
- À l'aide de votre pouce et de votre index, pincez les côtés du capuchon rose et retirez-le. Assurez-vous de ne pas faire sortir le pinceau blanc. Vous devrez replacer le capuchon sur le dispositif avant de nous retourner l'échantillon.

3 Trouvez une position confortable.

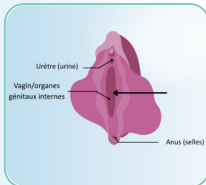

- Installez-vous confortablement, que ce soit en étant debout ou assis sur la toilette (comme pour insérer un tampon).
- D'une main, écartez vos grandes lèvres (organes génitaux externes).
- De l'autre main, insérez la partie supérieure du dispositif à l'intérieur du vagin jusqu'à ce que les ailes de l'écouvillon touchent vos grandes lèvres.

4 Prélevez votre échantillon.

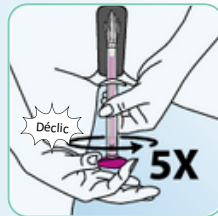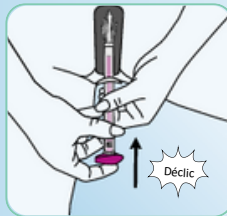

- Tenez le bas du tube transparent d'une main et, de l'autre, poussez le piston rose de manière qu'il touche le tube et qu'il ne puisse aller plus loin. Le pinceau sort alors du haut du tube. Lorsque le piston rose sera correctement inséré dans le tube transparent, vous entendrez un dé clic.
- Tournez le piston rose cinq fois dans la même direction. Après chaque rotation, vous entendrez ou sentirez un dé clic. Après ces cinq rotations, retirez l'écouvillon de vos organes génitaux.

5 Remballage votre écouvillon.




· Assurez-vous de ne pas toucher le pinceau blanc avec vos mains. Tenez le tube transparent d'une main.

· Avec l'autre main, tirez le piston rose jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

· Remettez en place le capuchon rose avec votre pouce et votre index. Vous entendrez ou sentirez un déclic lorsqu'il sera placé correctement.

· Remettez l'écouvillon dans son emballage d'origine.

6 Lavez vos mains et rapportez l'échantillon.

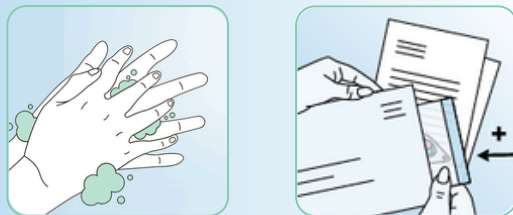

· Lavez vos mains avec du savon et de l'eau chaude. Suivez étape par étape les instructions fournies avec la trousse d'autodépistage du VPH, et retournez votre échantillon au poste sanitaire, au centre de santé ou au laboratoire pour analyse.

IMPORTANT



Pour usage unique seulement.



Ne pas utiliser ce dispositif pendant la grossesse ni dans les trois mois suivant l'accouchement.



Dans les 48 heures précédant le test, ne pas utiliser d'autres produits destinés à être insérés ou appliqués dans le vagin, à l'exception des condoms, des contraceptifs ou des lubrifiants à base d'eau.



Ne pas utiliser ce dispositif pendant les règles.



Ne pas utiliser ce dispositif si l'emballage de l'écouvillon est endommagé ou si sa date de péremption est dépassée.



Ne pas réutiliser ce dispositif : sa réutilisation pourrait causer une infection ou mener à une erreur de diagnostic.

Si vous rencontrez une situation inattendue n'ayant pas été décrite dans ce livret d'instructions, **veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé**. Tout incident grave lié à l'utilisation de ce dispositif doit être **signalé au fabricant ainsi qu'à un spécialiste du dépistage du cancer du col de l'utérus**.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre professionnel de la santé, consultez le cancertno.ca ou communiquez avec un spécialiste du dépistage du cancer du col de l'utérus par courriel au cervicalscreening@gov.nt.ca ou par téléphone au 1-866-313-7989, option 8.